



Návod k použití

Silikonová LED maska

Obsah

Princip výrobku	2
Návod	3
Parametry.....	4-5
Používání dálkového ovladače.	6
Nabíjení akumulátoru.....	7
Volitelný režim.....	8
Časté dotazy.	9
Opatření a zakázané použití	10

POZNÁMKA

Děkujeme vám za zakoupení silikonové LED masky. Před jejím použitím si prosím pečlivě přečtěte návod a věnujte pozornost preventivním opatřením pro zajištění správné obsluhy a používání tohoto výrobku.

Tento návod vám poskytne bezpečné a účinné postupy obsluhy. Po přečtení si ho dobře uložte pro další použití.

Princip výrobku

WMA potvrdil, že používání specifických vlnových délek světla může zlepšovat vitalitu kožních buněk a tkáně blízkým ozářením a zlepšit stav kůže. Silikonová LED maska využívá principu biofototerapie s nanotechnologií pro světlovodné materiály, nevytváří vysoké teploty a používá nízkoeenergetickou čistou světelnou technologii s dotykovou regulací pro péči o vaši kůži. Pro terapii je charakteristická přirozená mírnost, znatelný léčebný efekt, nízká rizikovost, žádné vedlejší účinky atd. Je to expert na péči o kůži, vhodný pro všechny typy kůže.

Silikonová LED maska využívá principu fotodynamiky k aktivaci hlubokých buněk a umožňuje lepší metabolizaci kůže. Po absorpci světla kůží je energie světla přeměněna na intracelulární energii, která relaxuje a posiluje vlasečnice a produkuje fotochemickou enzymatickou reakci s kůží, zvyšuje stav katalázy, která funguje jako „ochrana“ a „čistič“ buněk a zvyšuje aktivitu SOD. Podporuje rozklad ATP, který je zdrojem buněčné energie.

Podporuje buněčný metabolismus a syntézu, zvyšuje stav glykogenu a obsah proteinů a stimuluje 5 násobně kolagen. Stimuluje sekreci BFGF a EGF v těle, upravuje vlákna kolagenu a elastická vlákna, blokuje a eliminuje tvorbu melaninu, urychluje růst buněk, zrychluje cirkulaci krve a stimuluje vláknitou buněčnou tkáň. Produkuje kolagen, zvyšuje pružnost kůže a má důležitou roli při opravě stárnoucí kůže, kůže s vředy, akné, zlepšuje pevnost a snižuje vliv spálení sluncem.

Návod

1. Umyjte kůži na obličeji a osušte ji měkkým ručníkem.
2. Výrobek vyjměte z obalu a USB kabelem propojte s ovladačem.
3. Zapněte hlavní spínač.
4. Stiskem tlačítka barvy zvolte režim, pak stiskněte tlačítko času pro nastavení požadovaného provozního času, doporučené nastavení je 15-30 minut. Nedívejte se příliš dlouho do světla.
5. Krátkým stiskem hlavního spínače je možno nastavit intenzitu světla.
6. Tento výrobek se doporučuje používat v leže na posteli nebo pohovce pro uvolnění celého těla.
7. Lepších výsledků dosáhnete při použití s obličejovou maskou a parfémem nebo pleťovou vodou.
8. Po použití sejměte silikonovou kožní omlazovací masku a dobře ji vyčistěte, aby byla připravena k příštímu použití.



Parametry

Název výrobku:	Silikonová LED maska
Celkový počet LED:	232 kusů / Obličej: 114 / Krk: 118
Rozměry výrobku:	320 x 210 mm (Maska), 330 x 210 mm (Krk)
Vlnová délka LED:	415 nm, 630 nm, 830 nm
Nastavení jasu:	0 % - 100 %
Barva:	Bílá
Čistá hmotnost:	395g ± 5g
Režim :	4 režimy
Výkon:	Max 12W
Materiál:	Lékařský silikon
Časový spínač:	1-30 minut
Frekvence:	0-10000 Hz
Použití:	Pro obličej a krk
Kapacita akumulátoru:	4000 mAh
Záruka:	1 rok
Certifikáty	CE, FCC, RoHS, FDA, 510K

Obsah balení

- Obličejová maska pro terapii světlem
- Límec pro terapii světlem
- Dálkový ovladač
- Velcro popruhy (2 páry)
- Nabíjecí kabel Micro-USB
- Návod k použití
- Silikonové chrániče očí (2 páry)
- 1 kus pytlíku se stahovací šňůrkou





Štěrbiny pro popruhy

Silikonové oční chrániče

USB kabel



Pár pružných popruhů pro krční část



Pytlík se stahovací šňůrkou



Nabíjecí kabel



Náhradní oční chrániče



USB kabel

Pár Velcro popruhů pro obličejovou část
Jeden popruh s “**háčkem**” (**levý**) a
jeden popruh se “**smyčkou**” (**pravý**)



Návod k použití







Dálkový ovladač

Používání dálkového ovladače



- 1.** Displej: zobrazuje nabití akumulátoru a zvolený provozní čas, režim, intenzitu a frekvenci pulsů.
- 2.** Stav akumulátoru a ikona: zobrazuje zbylou kapacitu akumulátoru.
- 3.** Tlačítko nastavení: stiskněte pro otevření menu nastavení a přepínání jednotlivých možností nastavení, časového spínače, režimu, intenzity a impulsů (frekvence pro pulsní terapii světlem). Zvolená položka je označena oranžovým trojúhelníčkem. Pro nastavení zvolené položky použijte tlačítka + a -.
- 4.** Hlavní spínač: pro zapnutí dálkového ovladače podržte tlačítko stisknuté 3 sekundy.
Zobrazí se domovská obrazovka se standardním programem terapie. Pro zahájení terapie tlačítko znovu stiskněte (se standardním nastavením nebo po provedení nastavení). Pro vypnutí dálkového ovladače a zařízení podržte tlačítko stisknuté 3 sekundy.
- 5.** Tlačítka +/-: používají se pro nastavení zvolené položky.
Čas nastavujte po jedné minutě v rozsahu 1-30 minut.
Přepínejte 4 režimy: RED - červená, BLUE - modrá, NIR - blízká infračervená, RED+BLUE - červená + modrá.
Hodnotu jasu nastavte v rozsahu 1-100 % s krokem po 10 %.
Pro pulsní terapii nastavte frekvenci v rozsahu 1-10000 Hz s krokem po 1 Hz. "NULA" znamená, že frekvence je 0 Hz (pulsní terapie světlem je vypnutá).

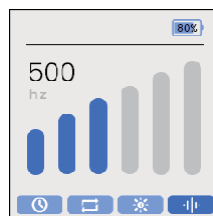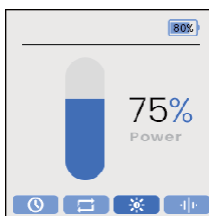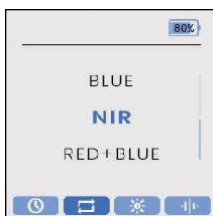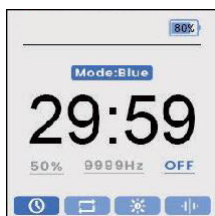


Nabíjení akumulátoru

- Při nabíjení masku nepoužívejte. Před nabíjením vždy zajistěte, aby bylo vypnuté napájení.
- Plné nabití ovladače typicky trvá asi 3 hodiny. Potom se dá používat až 3,5 hodiny.
- Ikona baterie na displeji indikuje zbylý stav akumulátoru.
- Nabítí zařízení doporučujeme, jakmile stav akumulátoru klesne pod 20 %.
- Když je akumulátor vybitý, ovladač se automaticky vypne.

Nabíjení

1. Nabíjení ovladače

Micro USB nabíjecí kabel připojte k micro USB zásuvce na spodní straně dálkového ovladače. Použijte nabíjecí USB adaptér 5V-1A. Pak připojte nabíjecí adaptér do nástěnné zásuvky.

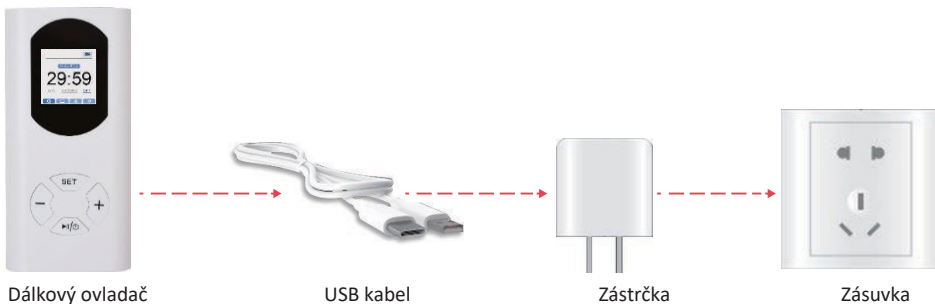

2. Power banka pro nabíjení ovladače

Micro USB nabíjecí kabel připojte k micro USB zásuvce na spodní straně dálkového ovladače. USB přípojka pro připojení power banky.




Volitelný režim

Červená: 630 nm. Účinky zpomalující stárnutí zahrnují posílení kolagenu a produkci elastinu. Zlepšený krevní oběh. Redukce vzniku jemných a hlubších vrásek. Redukce symptomů ekzémů, lupénky a růžovky, zarudnutí, svědění, loupání a otoků.




Modrá: 415 nm. Má antibakteriální účinky a redukuje popáleniny. Léčí slabou až střední akné eliminací bakterií vyvolávajících akné, reguluje nadměrně aktivní kožní maz a redukuje jizvy po akné. Redukuje pigmentaci a poškození sluncem. Redukuje kožní šupiny od lupénky.

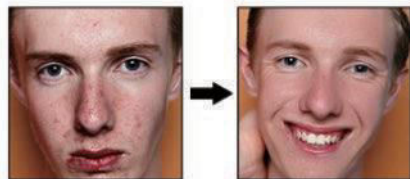

Růžová: 630 nm + 415 nm. Poskytuje kombinovaný účinek červeného a modrého světla.



BLÍZKÁ INFRAČERVENÁ: 830 nm. Cílí na hluboké fibroplastové buňky, stimuluje produkci kolagenu a elastinu, vede k měkké, pevnější kůži s mladším vzhledem.

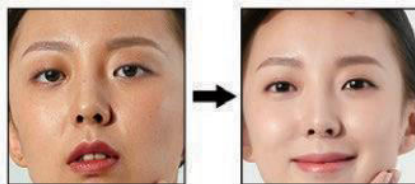

Časté dotazy

Otázka: CO JE TERAPIE SVĚTLEM

Odpověď: terapie světlem, nazývaná také fototerapie, je vysoce účinná, neinvazivní, nechemická terapie, která se dá používat pro bezpečné a bezbolestné léčení a obnovování mnoha částí těla. Terapie světlem využívá specifické vlnové délky nebo barvy světla pro ošetření kůže jak na povrchu, tak i pod povrchem. Různé vlnové délky světla mají různé léčebné použití a přínosy.

Otázka: JAKÉ JSOU PŘÍNOSY TERAPIE SVĚTLEM

Odpověď: přínos terapie světlem se značně liší v závislosti na použité vlnové délce světla. Přínosy terapie světlem zahrnují:

- **Červené (630 nm)** světlo zlepšuje cirkulaci krve a podporuje produkci kolagenu a elastinu, redukuje vzhled jemných a hlubších vrásek a jizev. Utěsňuje póry, zjemňuje odstín kůže a redukuje symptomy ekzémů, lupénky a růžovky, včetně zarudnutí, svědění, odlupování, otoků a prasklých vlasečnic.
- **Modré (415 nm)** světlo má antibakteriální účinky a redukuje popáleniny. Eliminuje bakterie způsobující akné, reguluje nadměrně aktivní kožní maz, redukuje pigmentaci, poškození sluncem a loupání kůže při lupénce.
- **Blízké infračervené (830 nm)** záření cílí na hluboké fibroplastové buňky, stimuluje produkci kolagenu a elastinu, vede k měkčí, pevnější kůži s mladším vzhledem.
- **Růžové (630 nm + 415 nm)** světlo poskytuje kombinovaný účinek červeného a modrého světla.

Otázka: KOLIK LED MÁ REVITAGLOW PRO?

Odpověď: celkový počet LED je 232: 114 v obličejové masce a 118 v krční masce.

Otázka: JAKÝ JE NEJLEPŠÍ LÉČEBNÝ POSTUP PRO AKNÉ?

Odpověď: pro léčení a prevenci akné je nejlepší modré světlo (415 nm). Má také dobrý účinek při léčení jizev po akné.

Otázka: JAKÝ JE NEJLEPŠÍ LÉČEBNÝ POSTUP PRO ZPOMALOVÁNÍ STÁRNUTÍ?

Odpověď: pro zpomalování stárnutí je nejlepší červené světlo (630 nm). To kromě toho podporuje průtok krve a produkci kolagenu a elastinu. To vede k redukcí jemných a hlubších vrásek, jemnějšímu odstínu kůže a těsnějším póřům.

Preventivní opatření

1. Nedívejte se přímo do zdroje světla masky nebo se do něj nedívejte delší dobu. Během používání mějte zavřené oči. Pokud cítíte, že světlo je příliš silné, můžete ho zakrýt bavlněnými vložkami nebo očními maskami.
2. Doporučuje se používat s přírodními, jednorázovými obličejovými maskami s ingrediencemi v dobré kvalitě nebo přípravky pro péči o kůži, jako je akné čistící pěna, které zvyšují absorpční efekt.
3. Vzhledem k tomu, že maska je vyrobena ze silikonového plastu, může se po otevření obalu objevit zápach, což je normální jev, který brzy zmizí.
4. Uvnitř luminiscenční vrstvy jsou umístěné elektrické obvody a LED světelná tělesa, která nesmíte mačkat, ohýbat nebo stlačovat.
5. Při používání v posteli před spánkem je nejlepší uložit masku po použití zpět do krabice nebo alespoň položit mimo postel.
6. Při čištění světelné masky je přísně zakázáno potápět masku do vody. Pouze ji otřete vlhkou utěrkou. Pružný popruh je možno omýt vodou.
7. Masku nečistěte agresivními chemickými roztoky.
8. Nevystavujte slunečnímu světlu.

Zakázané použití

- Nepoužívejte pro těhotné ženy, děti, osoby s epilepsií.
- Nepoužívejte pro osoby s onemocněním štítné žlázy nebo osoby podstupující léčení štítné žlázy.
- Nepoužívejte pro osoby trpící sluneční alergií nebo osoby užívající léky, které mohou způsobit alergii na slunce.
- Nepoužívejte pro osoby s popáleninami.
- Osoby, kterým používání není příjemné, by ho měly přerušit. Kontaktujte lékaře a řiďte se jeho pokyny.



Naše výrobky nejsou určeny k diagnostikování, léčení nebo prevenci jakýchkoli onemocnění.

Naše výrobky jsou nízkorizikové, všeobecné výrobky pro wellness/fitness v souladu s konceptem "Všeobecné zásady Wellness pro nízkoriziková zařízení" z 20. ledna 2015.