

Návod k použití

1. Vyčistěte si pokožku.
2. Použijte zklidňující a hydratační přípravky.
3. Pro ZAPNUTÍ masky podržte tlačítko stisknuté 3 sekundy.
4. Tlačítko postupně krátce tiskněte, dokud se nezobrazí požadovaná barva LED světla.
5. Masku nasadte na obličej na 10 až 20 minut.
6. Tlačítko stiskněte, dokud se maska NEVYPNE.

Pro optimální výsledky je možno terapii LED světlem používat denně.

Údržba a skladování

Údržba:

1. Hlavní díl otřete po použití suchou utěrkou a nemyjte ho přímo vodou.
2. Výrobek po použití vždy odpojte od elektrické sítě a nerozebírejte.

Skladování:


1. Tento výrobek skladujte na chladném a suchém místě, chráněném před vlhkostí a přímým slunečním světlem.
2. Výrobek nepotápějte do vody nebo jiných kapalin.
3. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Časté dotazy (FAQ)

1. Může tento výrobek používat nezletilá osoba (mladší než 19 let)?
Odpověď: tento výrobek je doporučený jen k použití dospělými osobami.
2. Má světlo výrobku vliv na oči?
Odpověď: vzhledem k jedinečnému provedení povrchu tohoto výrobku jsou zdroje světla rovnoměrně rozloženy po obličej tak, že se nenacházejí v blízkosti a okolo očí. V případě citlivosti používejte prosím výrobek se zavřenými očima.
3. Existuje nějaké omezení, jak často je možno výrobek používat?
Odpověď: toto zařízení je bezpečné pro každodenní používání.
5. Má toto zařízení nějaký vedlejší vliv na kůži?
Odpověď: ne. Pravidelná LED optická terapie nebo LED fotonová terapie je neinvazivní a bezbolestné.

opravy

Problém	Příčina problému	Odstranění
Světlo se nezapíná.	Odpojená zástrčka.	Připojte k zásuvce.
	Vybitý pomocný akumulátor.	Nabijte a připojte k zásuvce.
	Tlačítko není možno stisknout.	Stiskněte tlačítko spínače.
	Nefunguje.	Obraťte se na zákaznické centrum.

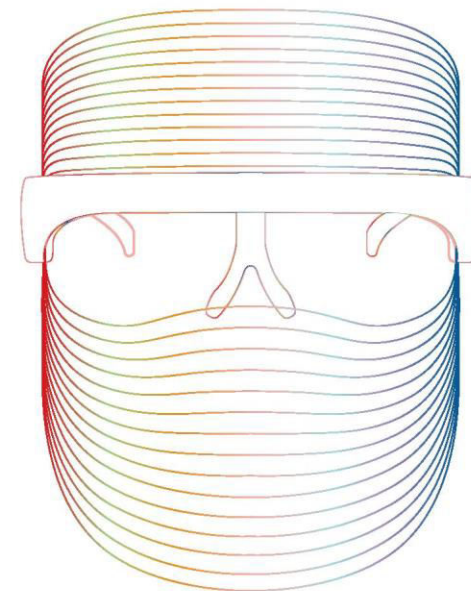

7 barevná LED maska

Péče u kůži terapií světlem

Návod k použití

Návod si pečlivě přečtěte pro zajištění bezpečného a správného používání.

Upozornění

Masku použijte jen bez připojeného kabelu.


1. Používejte na čisté pokožce, pod maskou nepoužívejte dráždivé prostředky, jako jsou kyseliny, ošetřovací přípravky a přípravky s obsahem retinolu.
2. Elektrický obvod uvnitř zařízení nestlačujte ani neohýbejte. Masku pro její ochranu po každém použití uložte naplocho.
3. Masku uložte zpět do krabice, aby nedošlo k jejímu poškození.

Principy výrobku

Tento výrobek používá 7 typů zdrojů světla, včetně červené, modré, purpurové, zelené, azurové a světle purpurové barvy pro snížení růstu akné rovnoměrným osvětlením zdroji světla s různými vlnovými délkami s využitím principu bio-ray terapie a lehkých materiálů s různými nanotechnologiemi a urychluje mikrocirkulaci v buňkách stimulací tvorby kolagenu, což má léčebný vliv na kůži.

Názvy jednotlivých dílů

1. USB nabíjecí kabel
2. Nosní opěrka
3. Spínač

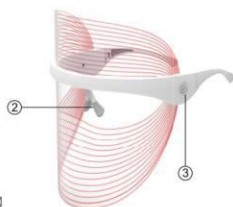

Funkce výrobku

Postupy LED optické terapie nebo LED fotonové terapie patří k neinvazivní, bezbolestné péči o kůži a jejich vliv je podstatný bez použití škodlivého světla. Jsou proto v široké míře využívány dermatology. Vlnová délka červeného světla sahá od 620 do 750 nm a podporuje oběh krve, urychluje metabolismus, vytváří kolagen, pomáhá při odstraňování vrásek a péči o kůži.

Vlnová délka modrého světla sahá od 476 do 495 nm a odstraňuje propionibacterium acnes, pomáhá při léčbě akné zlepšením prostředí ve vlasových folikulech.

Vlnová délka oranžového světla sahá od 590 do 620 nm a zlepšuje funkci výměny kyslíku v buňkách, urychluje cirkulaci krve spolu se slábnutím pigmentů, proto pomáhá změkčovat kůži.

Zelené světlo (520 nm) přispívá k neutralizaci, vyvažuje podmínky kůže, uvolňuje mentální stres a efektivně odstraňuje lymfoidy a edémy.

Purpurové světlo: je to červené a modré dvoupásmové světlo, kombinace dvou druhů fototerapeutických efektů, zvláště účinná při léčbě a odstraňování jizev po akné.

Světle purpurové světlo: odstraňování pigmentových skvrn, zlepšení jemných vrásek a pokleslé kůže.

Azurové světlo: postupné zlepšení energie buněk, podpora metabolismu.

Specifikace výrobku

Model	TL15-B
Název výrobku	Sedmibarevná LED maska
Rozměry výrobku	210 x 165 x 125 mm
Hmotnost výrobku	73 g
Materiál	ABS
Barvy	červená, modrá, oranžová, zelená, purpurová, azurová, světle purpurová
Výstupní napětí	5 V, 1 A
Příslušenství	LED maska, návod a kabel